

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ  
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ  
ТЕЛА



С ПРИМЕНЕНИЕМ  
PERFOSKIN Complex



# МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ТЕЛА

Уникальная процедура омоложения и естественного обновления кожи, соединяющая преимущества классического микронидлинга и восстановительный эффект редермализации.

## ПОКАЗАНИЯ

- Сниженный тонус и эластичность кожи
- Стрии
- Рубцы, в т.ч. постакне
- Гиперпигментация различной этиологии
- Мелкие и крупные морщины

# МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ТЕЛА

## МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ (MICRONEEDLING)

Контролируемое точечное повреждение кожи с целью стимуляции образования новых коллагеновых структур.



## РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ (REDERMALIZATION)

Улучшение качества кожи за счет уникального состава действующих веществ – гиалуроновой и янтарной кислоты

# PERFOSKIN Complex

## СОСТОИТ ИЗ:

### ■ PERFOSKIN Device

стерильное медицинское изделие одноразового использования

#### Действие:

- Естественная выработка коллагена
- Повышение эластичности кожи
- Улучшение проникновения активных ингредиентов



#### Для деликатных зон



шея и  
декольте



живот



руки

#### Для интенсивного воздействия



спина



ягодицы



бедро

# PERFOSKIN Complex

## СОСТОИТ ИЗ:

- **PERFOSKIN Prederm**

стерильное медицинское изделие одноразового использования

Специальная формула, содержащая 5 мл активных ингредиентов: 0,55% гиалуроновую и янтарную кислоту



# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

## ЭТАП 1. Местная анестезия.

- При необходимости с целью обезболивания, на участки кожи, что подлежат процедуре, предварительно наносится анестезирующий крем (время экспозиции – около 30 мин.)
- После этого кожа обрабатывается антисептическим средством для местного применения.




# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

## ЭТАП 2. Сборка PERFOSKIN Complex



**1** Снять с Perfoskin Device съемный корпус (a)

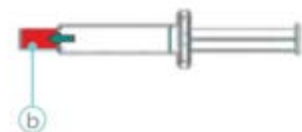


**2** Снять резиновый колпачок (b) со шприца Perfoskin Prederm




**3** Вставить в Perfoskin Device шприц (c)




**4** Одеть съемный корпус (a)

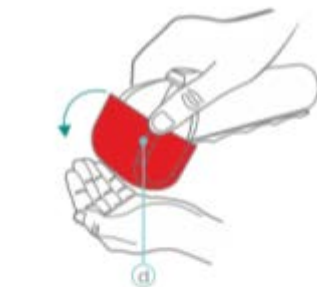

**5** Нажать большим пальцем руки на ребро колпачка (d). Приложив усилия, снять его. **ОСТОРОЖНО**, не поранитесь!

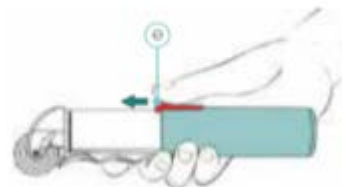

**6** Выдавите небольшое количество содержимого, плавно нажав на задвижку (e)

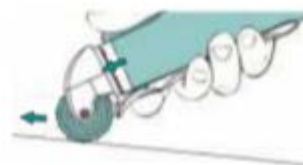


Проводить процедуру нужно одновременно нажимая на задвижку и проводя роликом по поверхности кожи



# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

## ЭТАП 3. Процедура МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ ТЕЛА

- В ходе процедуры последовательно прорабатываются небольшие участки натянутой кожи, соблюдая линии Лангера (рис. )
- Очень важно перед началом применения выдавить небольшое количество PERFOSKIN Prederm на барабан и следить за равномерной подачей препарата во время всей процедуры. Это также улучшает скольжение роллера.

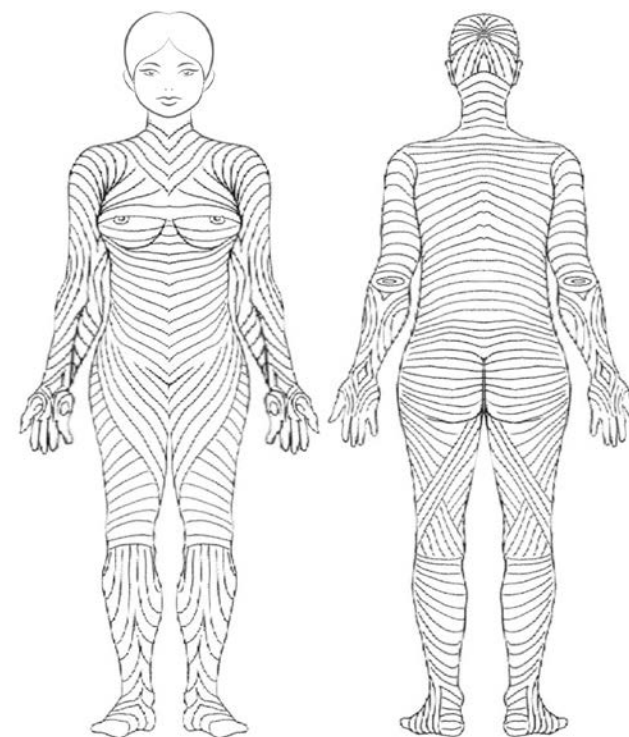




# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

## ЭТАП 3. Процедура МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ ТЕЛА

- Участки кожи прорабатываются в нескольких направлениях в зависимости от проблемы:


### СНИЖЕННЫЙ ТУРГОР КОЖИ

Движение в горизонтальном и вертикальном направлении

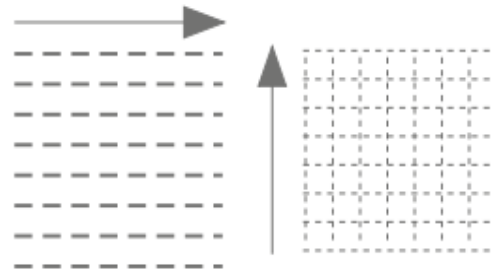

### СТРИИ, РУБЦЫ, ПОСТАКНЕ, ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

Движение в горизонтальном, вертикальном и двух диагональных направлениях

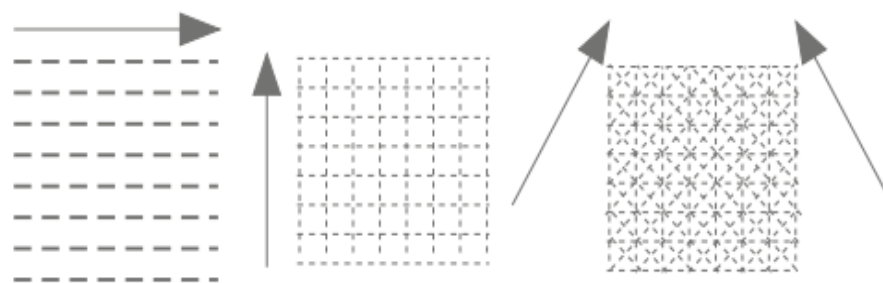

После обработки всей внешней и внутренней поверхности бедер даем остаткам препарата 3-5 минут адсорбироваться.

# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

## Послепроцедурный уход

- Распылите на обработанные участки постпроцедурный спрей Profi DeLux, тем самым обеспечив формирование на поверхности кожи защитной микропленки.
- Способ применения: спрей наносится путем 3-секундного распыления на расстоянии 25-35 см от поверхности кожи.



# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

К общим противопоказаниям относят:  
прием антикоагулянтов и  
кортикостероидов;

- гемофилия;
- сахарный диабет;
- беременность и лактация;
- онкологические заболевания

Микроигльчатую редермализацию не следует  
проводить в области непосредственного наличия:

- невусов
- ран и ожогов
- обострений акне
- келоидов
- варикозного расширения вен
- герпетических высыпаний

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ



- Количество процедур, необходимое для достижения желаемого результата, зависит от проблемы и текущего состояния кожи (от 2 до 8 процедур).
- В случае сниженного тонуса, дряблости кожи видимого эффекта можно достичь уже через 2 процедуры с интервалом около 7 дней.
- Наличие растяжек, рубцов требует более длительного курса – минимум 3 процедуры с интервалом около 7 дней.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

- Исключить посещение сауны, бани, бассейна и спортзала на протяжении 2-3 дней после проведения процедуры.
- В период заживления не следует носить обтягивающую, грубую, плотно прилегающую к обработанным местам одежду.
- В случае проведения процедуры на открытых участках тела обязательно используйте солнцезащитное средство с SPF не менее 50.



## ДОМАШНИЙ УХОД

- Для комфортного постпроцедурного периода в первые 2-3 дня рекомендуется применять в домашнем уходе спрей Profi DeLux.